


**ZOLL AED 3™**



**ZOLL.**

*Distribuzione e Assistenza Esclusiva*

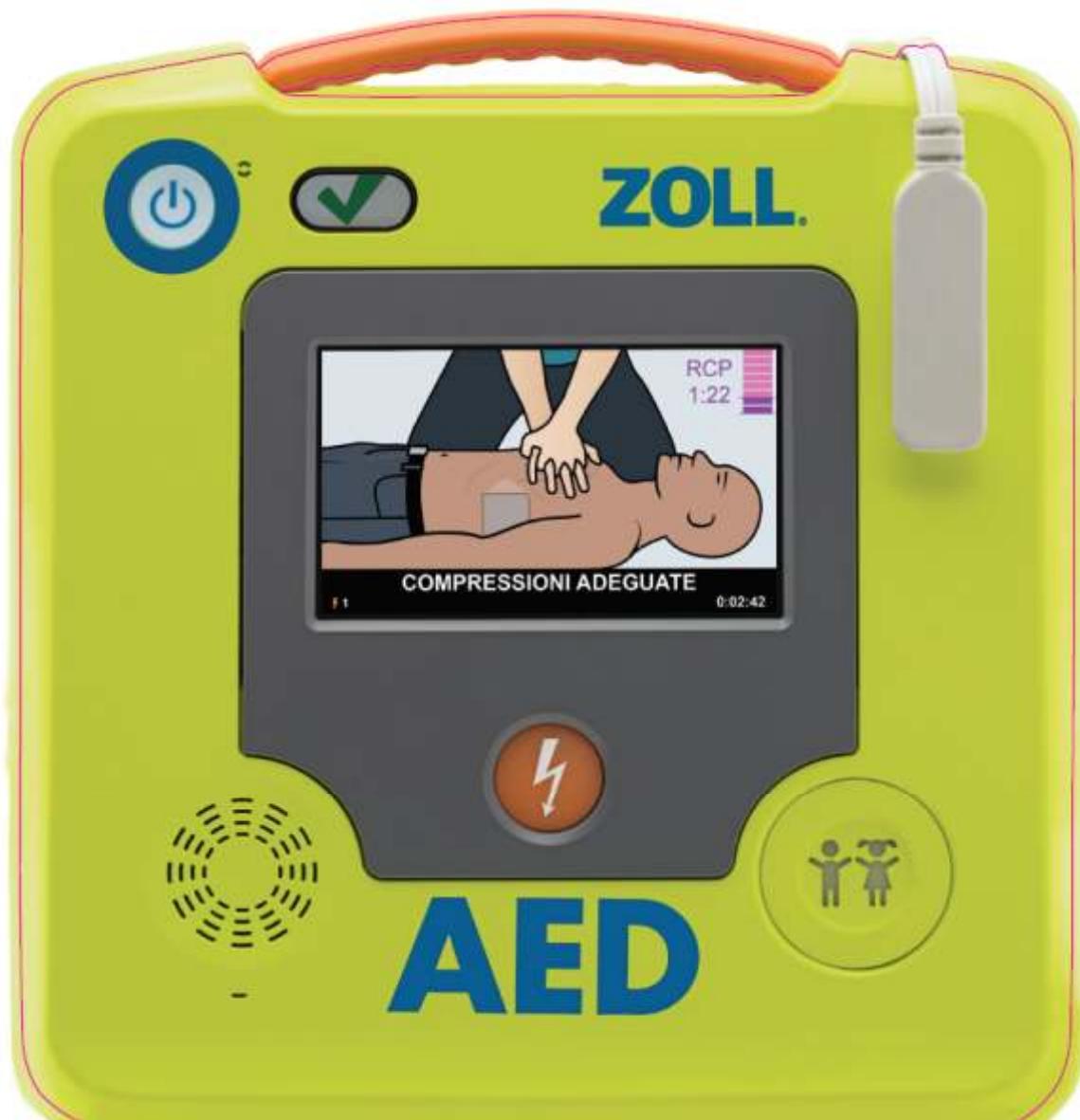

## PRONTI A SOCCORRERE IN UN ATTIMO?

Accade in pochi istanti. Una persona crolla — la vittima di arresto cardiaco improvviso (SCA) — e inizia la corsa contro il tempo. Chiama i soccorsi e il personale medico accorre. Ma i secondi scorrono preziosi. La possibilità di sopravvivenza della vittima sono migliori in presenza di un soccorritore dotato di defibrillatore esterno automatizzato (DAE) ed in grado di eseguire la RCP.

L'immediata avvio della RCP può raddoppiare o quadruplicare le sopravvivenze in caso di arresto cardiaco.

— Linee guida ERC 2015

### Progettati per Eroi Inaspettati

Le più recenti linee guida dei comitati mondiali per la rianimazione parlano chiaro: una defibrillazione efficace deve essere supportata da una RCP di alta qualità. La prima analisi cardiaca condotta dal DAE è di fondamentale importanza. Se indica che lo scarico non è possibile, solo la RCP di alta qualità può portare ad avere un ritmo cardiaco defibrillabile nell'analisi successiva. Una RCP di alta qualità fornisce a un cuore debole il sangue ossigenato necessario per permettere ad un successivo shock di ripristinare il ritmo cardiaco normale.

Il defibrillatore ZOLL AED 3™ guida l'utente nell'esecuzione di una RCP di alta qualità e, se necessario, avvia le scosse che possono salvare la vita di paziente. Grazie a ZOLL AED 3™ e a una risposta rapida, è possibile evitare la tragedia. La tecnologia proprietaria Real CPR Help® di ZOLL guida i soccorritori nell'esecuzione di una RCP di alta qualità, in accordo con le indicazioni di profondità e frequenza delle compressioni fornite nelle ultime linee guida. Il design intuitivo e innovativo, nonché le funzionalità avanzate di ZOLL AED 3™ danno ad eroi inaspettati la sicurezza e la conoscenza necessarie per intervenire su un arresto cardiaco improvviso.

Presso per e post-attenti: inferiori di 10 secondi e  
a scosse di integrazione: fino a superiori di 40%  
possono migliorare gli outcome dei pazienti.

— Linee guida ERC 2015



## DESIGN INNOVATIVO E FUNZIONALITÀ AVANZATE PER DARE MAGGIORE AIUTO AI SOCCORRITORI

# ZOLL AED 3™

## Il DAE che vi guida


### SMART

#### Real CPR Help®

- Real CPR Help aiuta i soccorritori nell'esecuzione di una RCP di alta qualità conforme alle attuali linee guida
- Feedback in tempo reale sulla profondità e la frequenza delle compressioni
- Immagini a colori e voce, testo e avvisi visuali integrati per il supporto durante il soccorso
- La barra delle compressioni permette ai soccorritori di capire in tempo reale se stanno eseguendo una buona RCP

#### Analisi RapidShock™

- Analisi del ritmo cardiaco in soli 3 secondi
- Una pausa pre-shock ridotta consente una RCP più continuativa

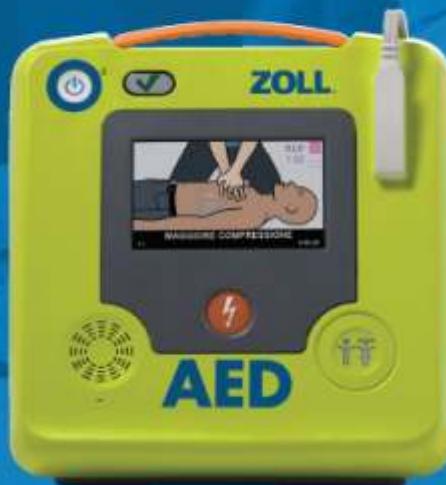

### READY

#### Soccorso Pediatrico Integrato

- Gli elettrodi CPR Uni-padr™ sono sempre pronti per il soccorso sia degli adulti che dei bambini

#### Bassi costi di gestione

- Gli elettrodi e la batteria durano 5 anni – minor numero di sostituzioni e bassi costi di gestione

#### Wifi attivato

- Monitoraggio e gestione semplificate della disponibilità del DAE e semplificazione del programma di gestione
- Notifiche automatiche in caso di autotest fallito
- Elimina la necessità di ispezioni fisiche periodiche di manutenzione
- Trasferimento rapido dei dati dei casi

*Distribuzione e Assistenza Esclusiva Autorizzata: ZOLL*

NOKI MED ITALIA  
 C/trà della Misericordia 38  
 36100 Vicenza  
[contact@nokimed.com](mailto:contact@nokimed.com)

Il dispositivo ZOLL AED 3 non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti. Il prodotto non ha ancora ricevuto l'autorizzazione normativa da parte della statunitense Food and Drug Administration (Agenzia per gli Alimenti e i Medicinali).

© 2018 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Program Management Observed, Real CPR Help, Uni-padr, ZOLL AED 3 e ZOLL sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi.

Storaggio negli Stati Uniti.  
 MCH IP 1707 0197-11